

Unité de cytopathologie

PATHO-Examen cytologique gynéco

<https://www.hug.ch/feuilles-de-demande>

Médecin Chef : Prof. Laura Rubbia-Brandt
Médecin Responsable : Dr J.-C. Pache (022 37) 24 904
Médecin Responsable Opérationnel : Dr E. Saiji (022 37) 24 974
Secrétariat : Tél./Fax : (022 37) 24 911 / (022 37) 24 906
Réception matériel : (022 37) 28 578 / 079 55 31 941
Bâtiment E-F – 5^{ème} étage, [local E05.3350.a](#)

M. / Mme / Mlle (SVP: caractères d'imprimerie)

N°EdS HUG :

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date de naissance : / /

Représentant légal si patient mineur : père mère

Nom/prénom :

Rue/N°:

Localité, No postal :

Patient : Ambulatoire Hospitalisé

Adresse pour facturation: Patient Demandeur Assurance

Nature du cas : Maladie Maternité Accident

AI n°AVS.....

Assurance : **N° Assuré** :

Demande d'examen cytologique gynécologique

Prescripteur (Nom/Prénom – Service / Adresse - Localité – Tel, Bip/Fax) (*) : (SVP : en caractères d'imprimerie ou tampon)

Médecins en copie (Nom/Prénom – Service / Adresse - Localité – Tel, Bip/Fax) (*) :

(*) Le laboratoire demandeur/prescripteur a obtenu l'accord du prescripteur/patient pour transmettre des copies à d'autres médecins que le médecin prescripteur

Renseignements et Diagnostic cliniques (Données fournies par le prescripteur)


- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pilule | <input type="checkbox"/> Grossesse |
| <input type="checkbox"/> Traitement hormonal | <input type="checkbox"/> Post-Partum |
| <input type="checkbox"/> AIU | <input type="checkbox"/> Ménopause |

DDR :
..... jour d'un cycle de jours

- Cas infectieux** (HIV, HEP, TBC...)
Préciser :
- Traitements** (RX, chimiothérapie, antibiothérapie...)
Préciser :

MATERIEL A EXAMINER :

- Dôme vaginal (1,2)
- Endocol (1,2)
- Exo-Endocol (1,2)
- Vagin (1,2)
- Vulve (1,2)
- Curetage endocervical (CEC) (1)
- Autre cytologie gynéco (1,2)
Préciser :
- Recherche HPV avec cytologie (1)

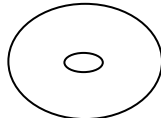

Contenant

- (1) Flacon ThinPrep avec PreservCyt
(2) ou frottis immédiatement fixé à l'alcool 95% 20 min

Urgence

Ne pas remplir SVP (Réservé labo)

Examen :

Colo.Spéc. :

Fr. reçus : Fr. prép : Vis tech :

Flacons : ml : Date tech :

Liqu :

Date de prélèvement :

Directives techniques pour examens cytologiques gynécologiques

Important :

- Prière de remplir complètement et lisiblement la feuille de demande d'examen
- L'identité du patient doit être écrite lisiblement sur la partie en verre dépoli des lames ou sur les récipients
- Utiliser des flacons fermant hermétiquement (bouchon à vis)
- Tous les cas infectieux doivent être signalés.

Transport :

- Les prélèvements cytologiques fixés en PreservCyt peuvent être conservé à température ambiante (stable 6 semaines).
- Le fixateur PreservCyt contient de l'alcool et du méthanol : liquide inflammable.

Particularités en fonction du matériel à examiner :

- **Prélèvement en milieu liquide :**
 - Utiliser toujours un flacon ThinPrep contenant une solution fixatrice PreservCyt
 - Agiter la brosse dans le liquide fixateur pour détacher les cellules
 - Retirer les brosses du flacon.
- **Prélèvement en milieu liquide pour un frottis de dépistage de l'exo-endocol :**
 - Effectuer un grattage de 360° sur l'orifice cervical à la zone de jonction squamo-cylindrique et un brosse endocervical
 - Utiliser toujours un flacon ThinPrep contenant une solution fixatrice PreservCyt
 - Agiter la brosse dans le liquide fixateur pour détacher les cellules
 - Retirer les brosses du flacon.
- **Curetage endocervical (CEC) :**
 - **Laisser les brosses dans le flacon ThinPrep** contenant du PreservCyt.
 - Une recherche HPV n'est pas réalisable pour ce type de prélèvement.
- **Prélèvement avec confection de frottis (étalement) :**
 - Les frottis doivent être immédiatement fixés dans de l'Ethanol 95% pendant 20 minutes.
 - Les frottis séchés à l'air sont impropres à la coloration cytologique de base (Papanicolaou).

La cytobrosse et spatule :

La spatule prélève les cellules exocervicales. La cytobrosse est insérée dans le canal endocervical. Un grattage sur 360° est effectué sur l'orifice cervical à la zone de jonction squamo-cylindrique.

La cervix-brosse :

Brosse en plastique insérée dans le canal cervical où une rotation est effectuée plusieurs fois. Le pouvoir abrasif de cette brosse permet de récolter des cellules exocervicales et endocervicales.

Le matériel est placé dans un milieu liquide contenant un fixateur cellulaire (PreservCyt)

La brosse doit être correctement rincée dans le flacon Thin prep.

Le matériel doit être le **moins hémorragique possible** car la présence de sang influence la qualité du prélèvement.



La brosse ne doit pas être laissée dans le flacon Thin prep.

Le flacon doit être correctement fermé pour le transport

THE ThinPrep PAP TEST

LE PRÉLÈVEMENT

- La brosse combinée 2,5 tours complets
- La combinaison spatule + cytobrosse
- Demi-tour dans un seul sens

Thinprep® Pap test
Le prélèvement d'échantillon

Brosse
OU
Spatule + Cytobrosse

Rincer immédiatement

Fermer jusqu'à la marque

CITYC