 Hôpitaux Universitaires Genève	Référentiel institutionnel médico-soignant	Référence : HUG_000000908
	Approbateur : ROLET Sylvie	Version n° 2.0
Réfection du pansement du PICCLine avec le système de fixation Grip-Lok® pour enfant et adulte		
Processus : Prise en charge du patient	Sous-processus : Prise en charge médico-soignante	Approuvé le 08/11/2024

Ce document est une annexe à la technique clinique de soins et surveillance PICCLine – procédure institutionnelle.

1. Résumé

Un système de fixation adhésif (ou stabilisateur) permet au cathéter PICCLine d'être fixé à la peau sans suture. Des fixateurs dit universels existent. Au sein des HUG, le StatLock® et Grip-lok® sont utilisés.

Cette technique complète celle explicative de la réfection du pansement avec le StatLock®.

2. Cadre de référence

Principes d'hygiène et d'asepsie VigiGerme® :

https://vigigerme.hug-ge.ch/sites/vigigerme/files/documents/procedures/principes_dhygiene_et_dasepsie.pdf

Technique d'enfilage et de retrait des gants de soins non stériles :

<https://vigigerme.hug-ge.ch/sites/vigigerme/files/documents/moyens/enfilageretreaitgantssoins.pdf>

Procédure institutionnelle Technique clinique de soins et surveillance PICCLine :

Procédure institutionnelle Annexe cathéter PICCLine réfection du pansement avec le StatLock®

3. Définition

Le dispositif de fixation Grip-lok® est utilisé pour fixer de façon sécuritaire à la peau les cathéters PICCLine ou MidLine en évitant des points de suture pour prévenir les risques de délogement. Grip-lok® est un dispositif sans latex, livré stérile sous sachet individuel préalable. Il est constitué d'une face autocollante, d'une face avec un creux permettant d'insérer les ailettes du cathéter et d'un rabat en scratch.

Cette technique complète celle de la réfection du pansement avec le StatLock® décrite dans la technique clinique de soins et surveillance PICCLine (2023).

La réfection du pansement du PICCLine peut se faire à deux personnes ; la réfection à une personne nécessite une sécurisation avec un Stéri-strip® du cathéter pendant la réfection pour éviter le retrait accidentel.

4. Contre-indications

Allergie connue aux adhésifs.

Réfection du pansement du PICCLine avec le système de fixation Grip-Lok® pour enfant et adulte

5. Précautions / prévention

S'assurer de la compatibilité entre les ailettes du PICCLine et le système de fixation Grip-Lok® pour une bonne stabilité. Les deux modèles ci-dessous sont compatibles avec le Power PICC Line Bard® et le Power PICCLine Solo Bard® (cf. technique clinique de soins et surveillance PICCLine, 2023).



Code article HUG : 495669



Code article HUG : 495670

Changement du pansement et du système de fixation :

- Après 24h si présence d'une compresse sur le point d'insertion ou si écoulement
- Tous les 7 jours
- Si le pansement est souillé, humide ou décollé, il doit être changé sans délai.
- Si pansement occlusif (en cas de saignement, d'écoulement par le point de ponction ou de rougeur locale sous le pansement ; il est possible d'utiliser des Steri-strip®, des compresses stériles et de l'adhésif) : changement aux 48 heures
- Immédiatement si décollé ou souillé

6. Matériel

- Solution hydroalcoolique pour les mains
- Antiseptique alcoolique à base de Chlorhexidine 2%
- Système de fixation Grip-lok®
- Masques de soin
- Gants non stériles (2 paires)
- Gants stériles (1 paire)
- Steri-strip®
- 1 pansement film transparent 10x12 cm
- Set à pansement
- 1 paquet de compresses stériles 5x5cm
- 1 paquet de compresses stériles 10x10cm
- Champ stérile
- Spray ou lingette antiadhésif de type Niltac® si besoin
- Protection type filet
- Sac poubelle

Réfection du pansement du PICCLine avec le système de fixation Grip-Lok® pour enfant et adulte

7. Déroulement

L'infirmière ou l'infirmier porte un masque et le ou la patiente est invitée à tourner la tête du côté opposé s'il-ou elle ne porte pas de masque. Prévoir l'ergonomie de l'infirmier et l'infirmière et une bonne visibilité du site d'insertion du cathéter : le ou la patiente est installée confortablement sur le dos en position demi-assise, le bras tendu légèrement en abduction posé sur un coussin.

- Ouvrir le 1^{er} emballage du set à pansement
- Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique
- Ouvrir le 2^{ème} emballage du set à pansement et y déposer champ stérile, pansement film transparent, Steri-strip®, fixation Grip-Lok®, compresses stériles
- Verser l'antiseptique alcoolique sur les compresses
- Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique
- Enfiler les gants non stériles
- Vérifier la longueur de la partie extériorisée du cathéter (1 graduation = 1cm)
- Imbiber de Niltac® le pansement transparent si nécessaire
- Retirer délicatement le pansement transparent en décollant les parties latérales puis décoller de bas en haut pour éviter la désinsertion du cathéter
- Retirer les gants non stériles
- Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique
- Glisser le champ stérile sous le bras de la ou du patient
- Enfiler de nouveaux gants non stériles (si les mains ont touché le bras du ou de la patiente ou le lit, se frictionner les mains avant d'enfiler les nouveaux gants non stériles)
- Désinfecter le point d'insertion avec de la chlorexidine alcoolique à 2 % - 3 fois

- Attendre que la peau soit bien sèche et sécuriser le cathéter sur le point d'insertion avec Steri-strip®




HUG

- Ouvrir délicatement (scratch) la partie supérieure du Grip-lok® et retirer les ailettes du PICCLine
- Retirer les gants non stériles
- Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique
- Mettre les gants stériles
- Désinfecter 3 fois le cathéter et la zone sous le cathéter en le maintenant avec une compresse 10/10 avec l'autre main
- Attendre que la peau soit bien sèche.

Réfection du pansement du PICCLine avec le système de fixation Grip-Lok® pour enfant et adulte



Ouvrir la partie supérieure du Grip-lok® sans retirer la protection de la partie collante à l'arrière

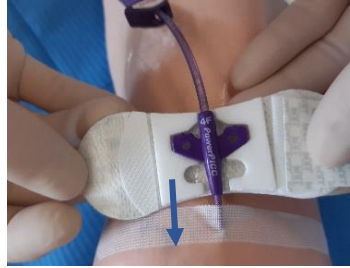

Présenter et insérer délicatement les ailettes du PICCLine dans le creux prédécoupé. Respecter le sens de pose



Retirer les protections des parties postérieures collantes



Coller la fixation du Grip-lok® sur la peau



Retirer la protection de la partie supérieure du Grip-lok®



Rabattre la languette scratch sur le PICCLine



Retirer délicatement le Stér Strip® en veillant à ne pas déloger le cathéter



Positionner le pansement film transparent en laissant visible le point d'insertion et en veillant à bien tunneliser le cathéter

- Retirer les gants stériles
- Se frictionner les mains avec la solution hydroalcoolique
- Noter la date de la réfection du pansement
- Documenter la mesure de la partie extériorisée sur DPI dans le cockpit.

Réfection du pansement du PICCLine avec le système de fixation Grip-Lok® pour enfant et adulte

8. Elimination des déchets

Elimination des déchets produits selon les filières différenciées et réglementées
<https://vigigerme.hug.ch/elimination-dechets-et-excreta>.

9. Auteurs

DALEX Eliane, infirmière spécialiste clinique en oncologie, direction des soins
CAMUS Véronique, infirmière spécialiste clinique, service prévention et contrôle de l'infection

Illustrations effectuées par E.Dalex

10. Relecture et validation

CROUSAZ Isabelle, infirmière spécialisée pour les accès vasculaires, direction des soins
VULLIAMY-STAEHLI Patricia, infirmière spécialisée pour les accès vasculaires, direction des soins

11. Liens / Annexes

Procédure institutionnelle Technique clinique de soins et surveillance PICCLine

Procédure institutionnelle Annexe cathéter PICCLine refection du pansement avec le StatLock®

Cette procédure est placée sous la responsabilité de la Direction des soins et de la Direction médicale et qualité des HUG. Elle s'adresse à tous les professionnels et professionnelles de la santé travaillant aux HUG et, à titre informatif, au public dans un souci de partage de connaissances.

Les HUG déclinent expressément toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou illicite de ce document hors des HUG.